
Adscope® Stethoskop

Gebrauchsanweisung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein ADC® ADSCOPE® Stethoskop entschieden haben. Ihr neues Stethoskop bietet eine unübertroffene akustische Empfindlichkeit, unvergleichliche Haltbarkeit und unvergleichlichen Komfort. Jede Komponente wurde sorgfältig entwickelt, um die Leistung zu maximieren.






Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle Adscope-Stethoskopmodelle: 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 615, 618 und 619.

Gerätebeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für medizinische Diagnosezwecke bestimmt. Es kann zur Auskultation von Herz-, Lungen-, Darm- und anderen Körpergeräuschen verwendet werden. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch bestimmt, verkauft oder bestimmt, außer wie angegeben.


Allgemeine Warnungen

Ein Warnhinweis in diesem Handbuch weist auf einen Zustand oder eine Praxis hin, die zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod des Patienten führen können, wenn sie nicht sofort behoben oder abgesetzt werden.


-  **WARNUNG:** Verwenden Sie das Stethoskop niemals ohne fest eingerastete Ohrstöpsel.
-  **WARNUNG:** Das Stethoskop enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
-  **WARNUNG:** Eine Kreuzkontamination des Stethoskops kann zu einer Infektion des Patienten führen. Reinigen und desinfizieren Sie das Stethoskop zwischen den Anwendungen wie unter Reinigung, Desinfektion und Lagerung beschrieben.
-  **WARNUNG:** Ohrspitzen können verschluckt werden und Erstickungsgefahr verursachen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß angebracht und gelagert sind.
-  **WARNUNG:** Stethoskopschläuche können eine Strangulationsgefahr darstellen. Von Kindern fernhalten.

Verwendung eines Bruststücks mit einstellbarer Frequenz (AFD-Modelle - 600, 601, 603, 604, 606, 608, 612, 614, 615, 618 und 619)

Adscopes mit AFD-Technologie bieten das verbesserte akustische Ansprechverhalten einer herkömmlichen Glocke und Blende. Eine Gummidichtung um den Umfang der Membran ermöglicht es Ihnen, den Frequenzgang durch Ändern des Anpressdrucks zu ändern.

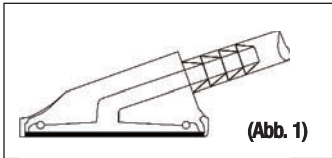

Für einen Niederfrequenzgang (Klingphase) halten Sie das Bruststück einfach mit leichtem Druck an Ort und Stelle. (Abb. 1)

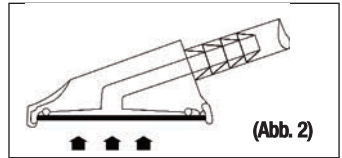


Für die Hochfrequenzüberwachung (Membranphase) drücken Sie mit der Fingerspitze fest auf das Bruststück. (Abb. 2)

Auswahl eines Kombinationsbrustharnischs (Beidseitige Modelle - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608 und 619)

Bei Kombinationsstethoskopen können Sie entweder die Membran für die Überwachung von Hochfrequenzgeräuschen oder die offene Glocke für die Überwachung von Niederfrequenzgeräuschen auswählen
Antwort.

Um eine Seite auszuwählen, halten Sie den Ventilschaft des Bruststücks in einer Hand und drehen Sie das Bruststück mit der anderen Hand um 180°, bis es einrastet. Der Stiel hat einen eingravierten Punkt, der mit der aktiven Seite ausgerichtet ist.

Um zu bestätigen, welche Seite aktiviert ist, tippen Sie leicht auf eine Seite und dann auf die andere, um zu hören, welche die positive Antwort liefert.

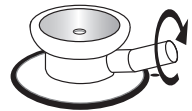

Membran Aktiviert




Glocke Aktiviert

Brustharnisch Umbauen (nur 601, 608)

Die Bruststücktrommeln 601 und 608 passen zwei verschiedene Bruststückaufsätze. Um die Glocke anzubringen, müssen Sie zuerst das Zwerchfell entfernen und dann die Glocke im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag einfädeln.

Drehen Sie das Zwerchfell gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen.

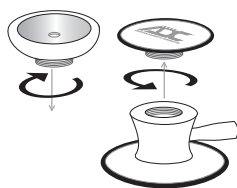

Ausrichtung des Headsets

Die Binauralen (Ohrhörer) sind um 15 ° abgewinkelt, erlauben eine komfortable, akustisch abgedichtete akustische Passform. Die Ohrmuscheln sollten nach vorne zum Nasenrücken zeigen, damit sie richtig passen.



Richtig




Falsch

Einstellen der Federspannung im Headset

Um die Spannung zu verringern, fassen Sie die Binauralen mit beiden Händen und den Fingern in der Mitte des „Y“ im Schlauch fest, wobei sich die Daumen an jeder Seite befinden, an der sich der Schlauch verzweigt. Biegen Sie die Binauralen allmählich, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.

Um die Spannung zu erhöhen, halten Sie die Binauralen in der Hand und drücken Sie die Binauralschläuche nach und nach zusammen.

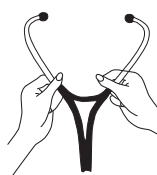

**Verspannungen
abbauen**




**Die Spannung
erhöhen**

VORSICHT: Eine übermäßige Einstellung könnte die Feder schwächen.

Verkürzung der Schlauchlänge (NUR Modelle für Kliniker)

Clinician Series Adscopes sind mit 22-Zoll-Schläuchen ausgestattet.

Wenn eine kürzere Länge gewünscht wird, entfernen Sie das Bruststück vom Schlauch. Schneiden Sie den Schlauch mit einem scharfen Rasiermesser auf einer harten Oberfläche auf die gewünschte Länge. Verwenden Sie zum Erweichen des Schlauchs einen Föhn bei schwacher Hitze etwa eine Minute lang und setzen Sie den Bruststückschaft wieder in den Schlauch ein.

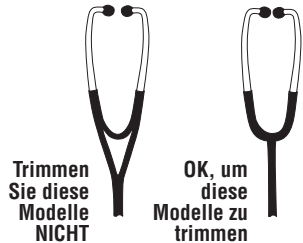

VORSICHT: Lassen Sie die Schläuche abkühlen, bevor Sie sie verwenden.

Membran Austauschen


Aufsteckrand (PVC): Nehmen Sie die Felge ab und entfernen Sie die abgenutzte Membran. Durch neues Diaphragma ersetzen und den Rand wieder anbringen, indem der Rand leicht gedehnt wird, bis die Kante des Bruststücks vollständig in die Spur innerhalb des Randes eingreift.



Ersetzen von Frontplatten (618 Modelle)

Entfernung: Halten Sie das Bruststück mit einer Hand fest. Knallen Sie den alten Teller schräg von hinten ab.

Ersetzen: Positionieren Sie den Boden der neuen Platte an der Buchse des Bruststücks. Rasten Sie das Oberteil fest ein.

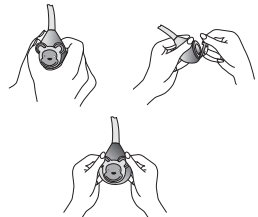

Ersetzen von Eartips

So ersetzen Sie Adsoft™ Plus Eartips: Schieben Sie den Adsoft Plus-Ohrstöpsel über den Adapter, bis er fest im internen Kanal einrastet. Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Hörröhre.



Reinigung, Desinfektion und Lagerung

- Reinigen Sie Ihr Adscope zwischen den Patienten entweder mit einem 70% igen Isopropylalkohollösungstuch, einem 70% igen Isopropylalkoholtuch oder einem Einwegtuch mit Wasser und Seife. Wischen Sie alle Oberflächen ab, einschließlich Bruststück, Schlauch, Headset und Ohrstöpsel.
- Die Membran, der nicht abkühlende Klingelring und die Ohrstöpsel können zur gründlichen Reinigung entfernt werden, wenn dies gewünscht wird. Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind. Bruststück nicht entfernen.
- Bei Lagerung in der Originalverpackung kann die geformte Wanne auch abgewischt werden, um das Risiko einer erneuten Kontamination zu verringern.
- Vermeiden Sie extreme Hitze, Kälte, Lösungsmittel oder Öle.
- Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Ohrstöpsel sicher am Headset befestigt und unbeschädigt sind.
- Tauchen Sie das Stethoskop nicht in Flüssigkeiten.
- Nicht dampfsterilisieren. Wenn eine Sterilisation erforderlich ist, nur mit Gas sterilisieren.

Eingeschränkte Garantie

Bitte registrieren Sie Ihr Stethoskop online unter: <http://www.adctoday.com/register>.
ADC garantiert seine Produkte gegen Material- und Verarbeitungsfehler nach normaler Gebrauch und Service wie folgt:

1. Der Garantieservice erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Einzelhandelskäufer und beginnt mit dem Datum der Lieferung.
2. Für Ihr Adscope-Stethoskop besteht eine lebenslange Garantie.

Was ist abgedeckt: Ersatz von Teilen und Arbeit.

Was nicht abgedeckt ist: Transportkosten zu ADC. Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Neben-, Sonder- oder Folgeschäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben-, Sonder- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass diese Beschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt.

So erhalten Sie einen Garantieservice: Senden Sie das (die) Porto (s) für Artikel an ADC, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr.

Implizite Garantie: Eine implizite Garantie ist in ihrer Dauer auf die Bedingungen dieser Garantie beschränkt und geht in keinem Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus (außer wenn dies gesetzlich verboten ist).

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind.

Für australische Verbraucher

Unsere Waren sind mit Garantien versehen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Erstattung eines größeren Fehlers und auf Ersatz aller anderen vorhersehbaren Schäden. Sie haben auch Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt.

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie uns unter
www.adctoday.com/register

FÜR FRAGEN, KOMMENTARE
ODER VORSCHLÄGE GEBÜHRENFREI AN:
1-800-ADC-2670
ODER BESUCHEN
www.adctoday.com/feedback

Dieses Handbuch ist online in verschiedenen Sprachen
verfügbar. Folgen Sie den Links für Sprachoptionen.
www.adctoday.com/care



ADC

55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.

Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom



IB p/n 9320D-00 rev 17

Alle Modelle werden in den USA
akustisch getestet und geprüft.
Alle Modelle (außer 619) werden in den
USA zusammengesetzt und verpackt.

Komponenten hergestellt
in Taiwan und China
tel: 631-273-9600
zollfrei: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
info@adctoday.com



Gedruckt in den USA.